


オンライン粒子除去フィルター

サンプルラインの詰まりを解消

サンプルに粒子が含まれていると、微細なサンプルチューブやネブライザー内部に詰りを引き起こす可能性があります。粒子除去フィルターはシンプルかつ効率的にそのリスクを排除します。フィルターは簡単にオートサンプラープローブとネブライザー間のサンプルチューブ上に設置可能です。内部には120ミクロンのフィルターが配置され、外径1/16インチと外形1.3mmのサンプルチューブでご使用いただけます。

フィルター内に蓄積されました粒子は逆流洗浄と超音波洗浄で簡単に取り除く事が可能です。フィルター材質はPEEKのため全ての一般的なサンプルに対応しています。

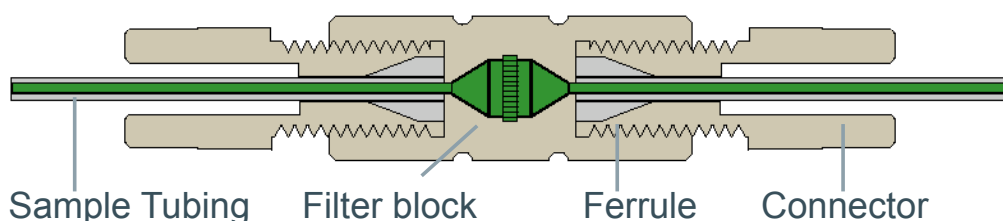

詳しくはwww.geicp.comでご確認いただくか、enquiries@geicp.comにお問い合わせください。



GLASS EXPANSION
Quality By Design

Asia Pacific

6 Central Boulevard
Port Melbourne VIC 3207
Australia
+61 3 9320 1111
enquiries@geicp.com

Americas

31 Jonathan Bourne Drive
Unit 7, Pocasset, MA 02559
USA
508 563 1800
geusa@geicp.com

Europe

Friedenbachstrasse 9
35781 Weilburg
Germany
+49 6471 3778517
gegmbh@geicp.com